


# Systemec Mediafill maljanvalulaite

Systemec Mediafill maljanvalulaitteet lisäävät tuottavuutta ja vapauttavat henkilöresursseja tehtäviin joita kone ei voi korvata! Maljanvalu onnistuu nyt täysin automaattisesti, tarkasti ja aseptisesti.

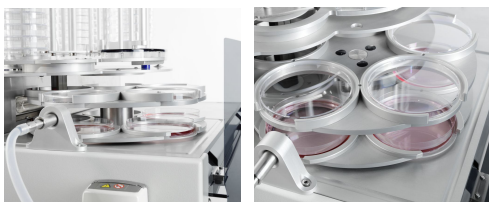

## Systemec Mediafill:

- helppo ja opastava käyttöliittymä
- suurikokoinen ja selkeä kosketusnäyttö
- maljatyypin valinta yhden näppäimen avulla
- täysin automaattinen prosessi säästää työaikaa
- pehmeä ja hiljainen toiminta minimoi melun
- helposti puhdistettavat tasaiset pinnat
- irrotettava karuselli helpottaa lastaamista
- integroitu peristalttinen pumppu 1-1000 ml
- integroitu peristalttinen pumppu lisäaineita varten
- pumppujen ohjaus saman käyttöliittymän kautta
- tippalukko annostelupäässä
- ravistelijä takaa tasaisen kerroksen koko pinta-alalle
- UV-valo (254 nm) pienentää kontaminaatoriskiä
- myös manuaalitäyttömahdollisuus; jalkapoljin/ajastin
- Peltier-jäähdytys maljojen jäähdytystä varten (optio)
- tulostus suoraan maljalle (optio)
- nopeus: 500 ml/min maljoille tai man. 1000 ml/min
- annosteluviive 0-10 sekuntia
- lastauskapasiteetti: 220, 440 tai 660 maljaa kerralla
- roottorit maljoille: 90 mm, 60 mm ja 30 mm

	Mediafill	Karuselli 220	Karuselli 440	Karuselli 660	Pumppu	
Pituus	683 mm				Annostelutilavuus	1-1000 ml
Leveys	662 mm				Tarkkuus @ 15 ml	1 %
Korkeus	348 mm	410 mm	760 mm	1110 mm	Annostelutilavuus (lisäysepumppu)	3-10 %
Halkaisija		566 mm	566 mm	566 mm		
Kokonaiskorkeus		800 mm	1140 mm	1490 mm	<b>Annostelunopeus</b>	
Maljapinon max. korkeus		330 mm	680 mm	1030 mm	manuaalinen	1000 ml/min.
Maljan halk.		90 mm	90 mm	90 mm	malja-annostelu	500 ml/min.
Maljan kork.		12-26 mm	12-26 mm	12-26 mm	annosteluviive	0-10 sek.
Kapasiteetti (maljan kork. 16,5 mm)		220 kpl	440 kpl	660 kpl		
Paino	37,5 kg	6,9 kg	8,4 kg	9,9 kg	<b>UV-valo</b>	
					teho	9 W
					UVC-valoteho	2,3 W (254 nm)